

共同印刷健康保険組合 ご加入者さま向け



# 自宅で子宮頸がんリスクを調べられる 「HPVセルフチェック」のご説明

2023年10月

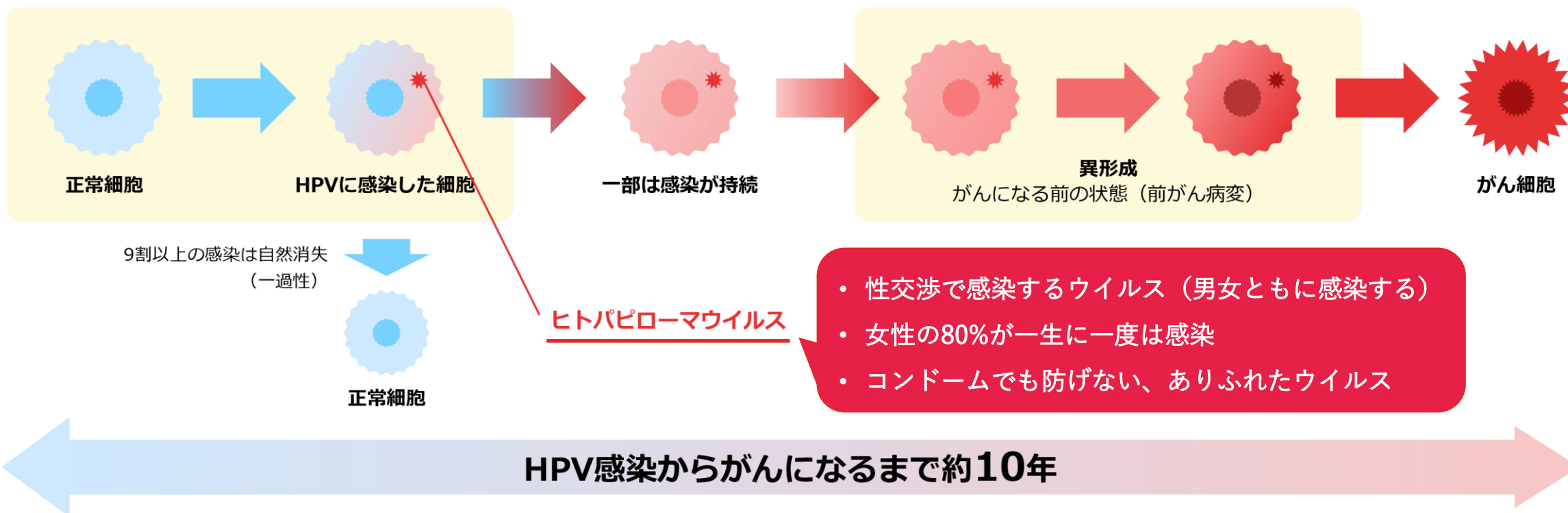
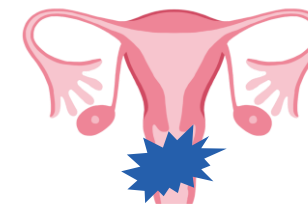
Hatch Healthcare株式会社 がん事業部 &Scanプロジェクト



# 子宮頸がんとは？

子宮頸がんの主な原因は、**性交渉によるHPV（ヒトパピローマウイルス）の感染**

## HPV感染からがん発生までのイメージ




✓子宮頸がんは性交渉によるHPV感染が原因 (コンドームでも予防不可)

✓HPVは、女性の80%が一生に一度は感染する身近なウイルス = 誰にでもリスクがある

# 子宮頸がんにおける早期発見（定期的な検査）の重要性

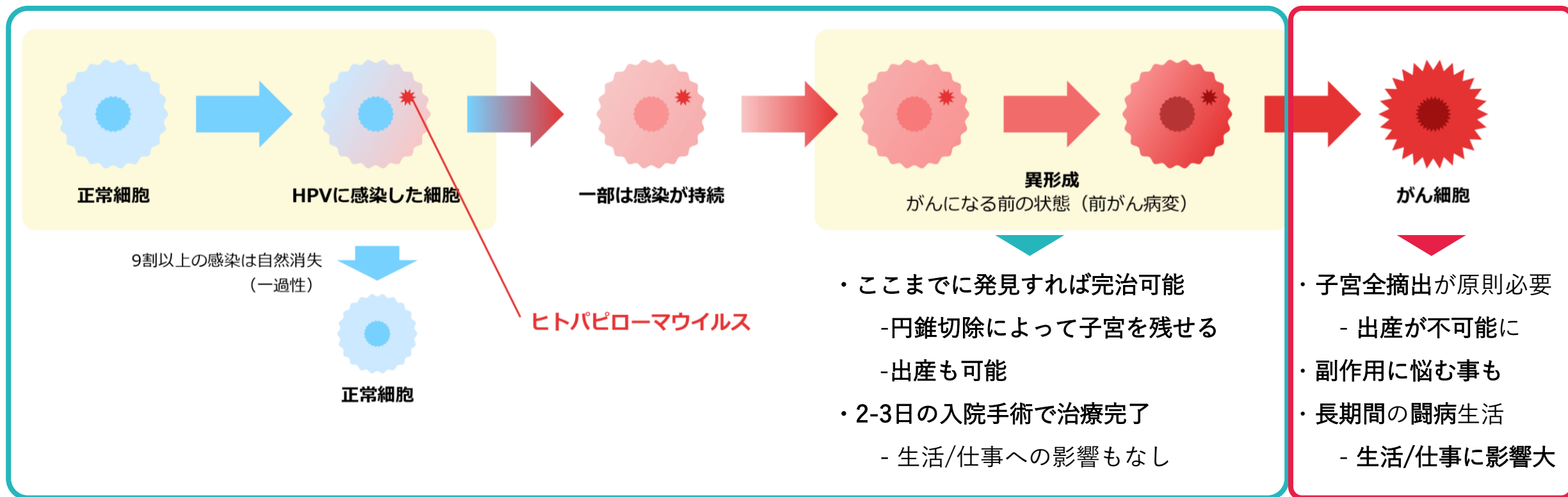自覚症状がなし  
⇒検査での発見が重要

自覚症状あり  
(不正出血等)



がんになるまで自覚症状がないため、早期発見には定期的な検査を受けることが必要不可欠

# 子宮頸がんの検査について

## 細胞診（＝子宮頸がん検診）

### 概要

- 子宮頸部の細胞の異形成の度合いを調べる

### 手法

- 子宮頸部から細胞をこそぎ落とし顕微鏡で調べ異常細胞の有無を検出

### 特徴

- 膣奥にある子宮頸部から、ヘラ等で細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査
- 適切な細胞を採取する必要があるため、医師採取が必須



## HPV検査（自己採取型）

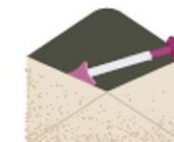
- HPV（＝子宮頸がんの原因ウイルス）感染有無を調べる
- ハイリスク型（16型・18型・その他\*）を検知  
\*＝31型・33型・35型・39型・45型・51型・52型・56型・58型・59型・66型・68型
- 子宮頸部付近から粘液を採取し、HPV感染有無を検出
- 自己採取でも医師採取と同等の病変発見率（高精度）
- 粘液採取のため、自己採取でも検査可能、痛くない
- 自宅での採取のため、恥ずかしくない
- 家で好きな時間に受けられるので、面倒くさくない



WEB申込



自宅へ  
キット郵送



郵便ポストへ



結果はWEB


自己採取型HPV検査では、自宅で簡単に約3分で子宮頸がんのリスクをチェック可能

# 自己採取型HPV検査のキット、及び採取方法について
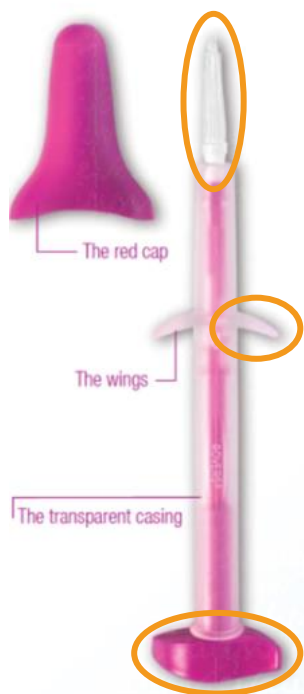
## 自己採取用検査キット

## 使用方法


- 世界で最も普及している標準的なデバイス
- オランダで国のプログラムとして使用されている
- 精度も50,000件以上の臨床試験により検証済み





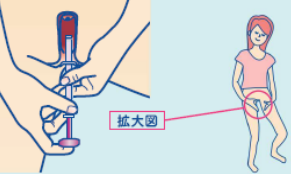

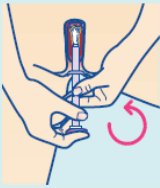
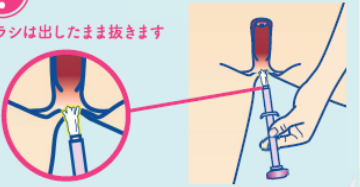

先端が柔らかいブラシのため、痛みがなく、粘液を採取可能

ストッパーがついており、挿入しすぎることのない安全設計

膣内に挿入し、ハンドルを回すだけで簡単に採取

約3分で完了します!  
**使用方法**      こちらから、採取方法の動画もご覧いただけます▶ 

HPVセルフチェックキットに入っているもの... 検体採取スティック/検体シール/本書(取扱説明書)/返却用袋/添付文書

- 1 採取する前に手を良く洗い、清潔な状態にします。  

- 2 開封したら、キャップの両端(下図参照)に力を入れてキャップを外してください。パッケージは返送時に使用しますので、捨てないで下さい。  

- 3 中腰になって、白いブラシをスティック中にしまったまま、ストッパーが肌にあたるまで挿入してください。  
 拡大図
- 4 持ち手を固定したまま、ピンクのハンドルをゆっくりと押し込みます。この時「カチッ」という手ごたえが感じられるところまで押し下さい。  
 カチッ
- 5 ピンクのハンドルをまわして、検体(粘液)を採取します。1回まわすごとに「カチッ」という手ごたえがあるので、5回まわした後、スティックを丁寧に引き抜いて下さい。  
 右回りでも左回りでもかまいません
- 6 持ち手部分を持ち、白いブラシが本体に収まるまでハンドルを引きます。この時、白いブラシ部分には触れないように注意しましょう。  
 ブラシは出したまま抜きます
- 7 キャップを本体先端にかぶせ、「カチッ」と音がするまではめ込みます。  
 カチッ

次は検体シールを貼りましょう ▶

**検体シールの貼り方**

検査機関では、検体シールに基づいてあなたの検体(粘液)検査を行います。記入漏れがないよう検体シールを貼っていきましょう。

- 8 検体シールに、①カタカナでフルネーム ②年齢③ID(指定されている場合)④採取日を記入します。シールを以下の場所に貼り付けて下さい。  
 ・検体(粘液)採取後のスティックの持ち手部分  


姓	名
年齢	性別
採取日	
- 9 取っておいた外パッケージにスティックを「カチッ」とはめ込んで下さい。  
 カチッ
- 10 氏名(カタカナ)と採取日を記入した返却用袋に、スティックの入ったパッケージを入れ封じます。  


お疲れ様でした!  
 ここをもう一度チェックしたら、採取後なるべく早く(できれば1週間以内に)、指定された提出先に提出して検査結果を待ちましょう!

- ピンクのキャップを、はめましたか?
- 検体シールの名前は、カタカナですか?
- ピニール袋は、封をしましたか?

世界中で普及しているキットであり、精度が高く、痛みなく、安全に、約3分で検査が可能

# 無料で自己採取型HPV検査がご利用頂けます

対象：20歳以上の女性加入者 申込締切：2024年1月末日まで(2023年度)



## サービスの流れ



ステップ1  
申し込み



ステップ2  
自宅にキットが届く




ステップ3  
自分で採取し、  
郵便で送り返す



ステップ4  
結果を見る

## 検査キットについて

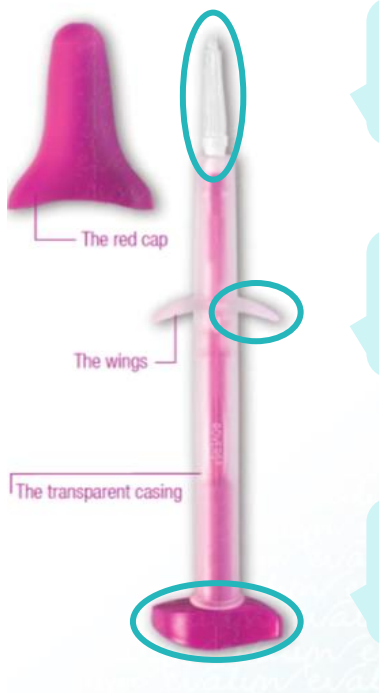- ・ 自宅で3分で検査が可能
- ・ 安全設計で痛くない
- ・ 直感的なデザインで簡単に使用可能



柔らかいブラシで  
痛くない

ストッパーがあり、  
安全安心

膣内に挿入し、  
ハンドルを回すだけ  
の簡単検査

## お申し込み方法

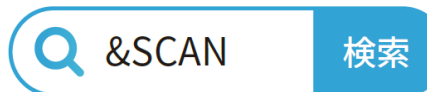
### QRコードからアクセスする場合

QRコードからWebサイトにアクセスしてお申し込み



### URLからアクセスする場合

- 1 URL・検索からWebサイトにアクセス



<https://andscan.jp>

- 2 専用コードを入力してお申し込み  
共同印刷健康保険組合  
加入者専用コード

**56867043**

ご自宅で3分の検査となっておりますので、みなさまこの機会にぜひ受けてください

# 無料で自己採取型HPV検査がご利用頂けます

対象：20歳以上の女性加入者 申込締切：2024年1月末日まで(2023年度)



## サービスの流れ



ステップ1  
申し込み



ステップ2  
自宅にキットが届く



ステップ3  
自分で採取し、  
郵便で送り返す



ステップ4  
結果を見る

## 検査キットについて

- 発送日にメールで連絡
- 申し込みから  
約3-5営業日でキットが到着



- キット返送後、  
約1週間で結果通知
- マイページ上で結果を閲覧

## お申し込み方法

### QRコードからアクセスする場合

QRコードからWebサイトにアクセスしてお申し込み



### URLからアクセスする場合

- 1 URL・検索からWebサイトにアクセス




<https://andscan.jp>

- 2 専用コードを入力してお申し込み  
共同印刷健康保険組合  
加入者専用コード

**56867043**

ご自宅で3分の検査となっておりますので、みなさまこの機会にぜひ受けてください

A close-up photograph of a person's hand holding a small, light blue butterfly with black spots on its wings. The butterfly is perched on the person's index finger. The background is softly blurred, showing more of the hand and a hint of a blue object. A semi-transparent white horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the Japanese text.

ご視聴ありがとうございました